




open up new
perspectives



sinus- Obliquus


dedicated for patients with
symptomatic obstructions
of the iliac veins



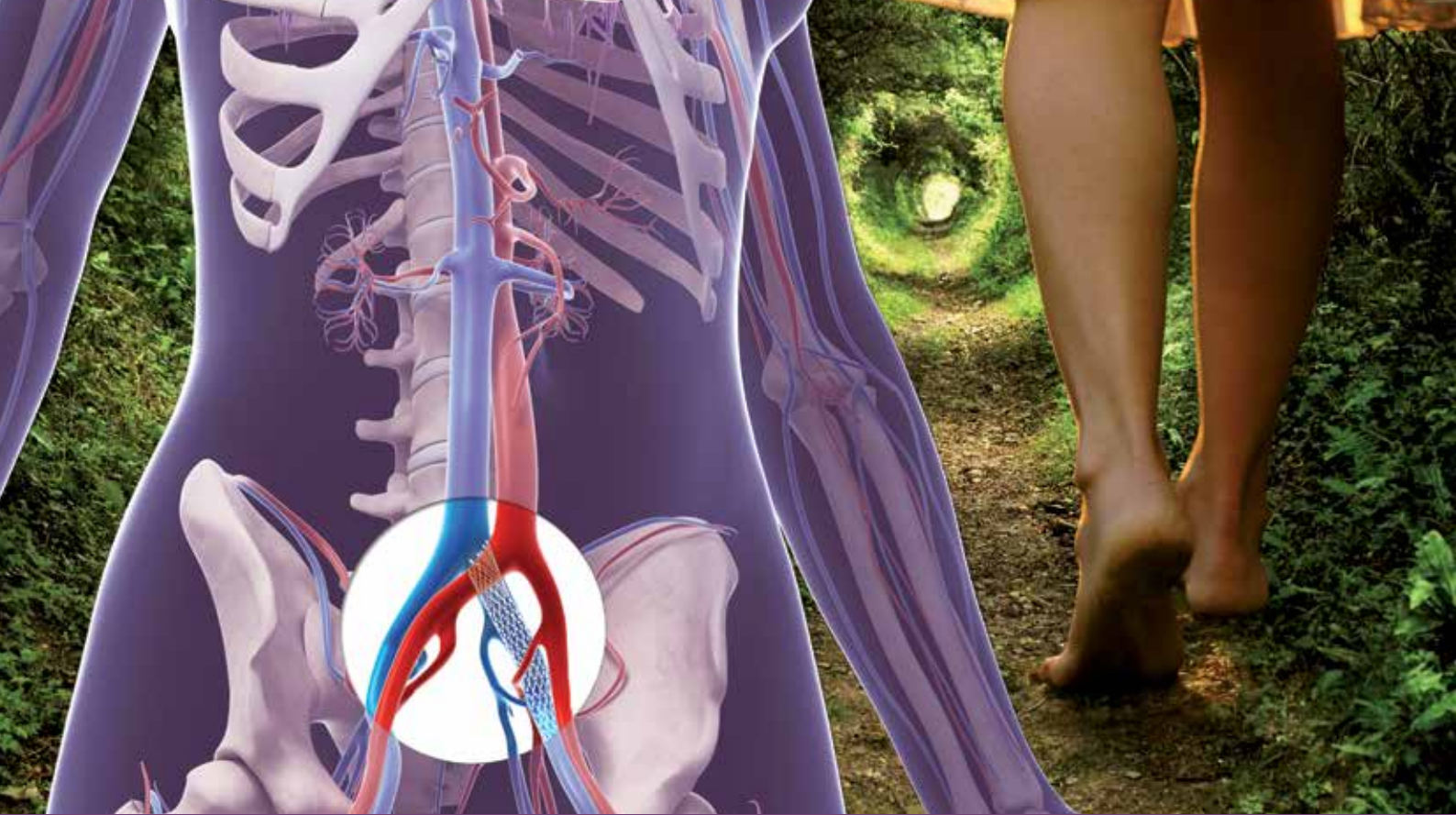

sinus-Obliquus

the first oblique venous stent

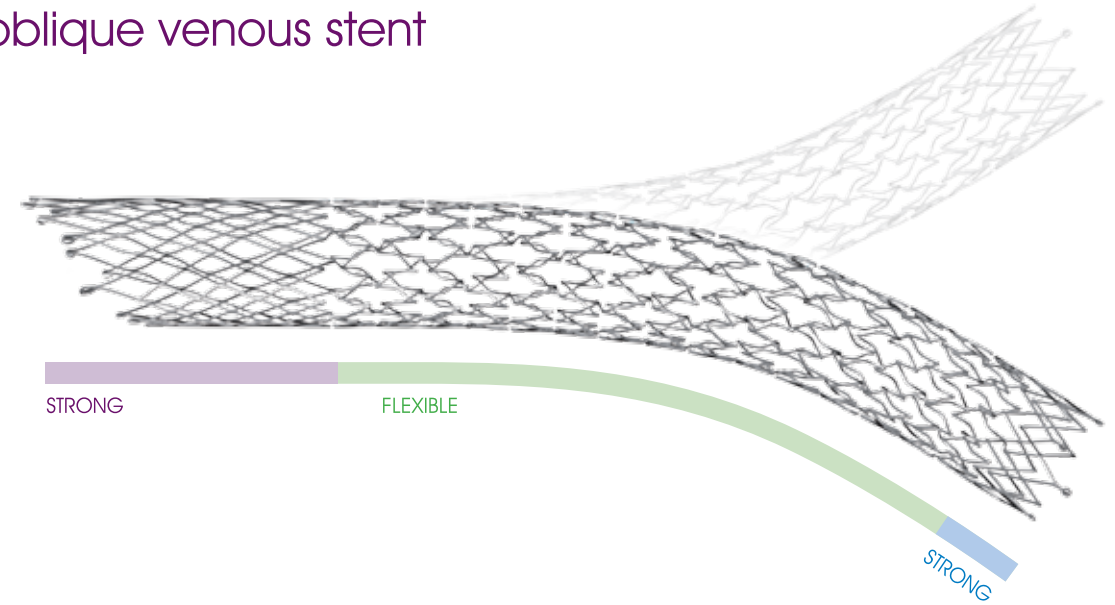

A dedicated solution



In mindestens 50% der Fälle einer linksseitigen Beckenvenenthrombose findet sich ein May-Thurner Syndrom als obstruktives Hindernis.

Bei dieser anatomischen Anomalie überkreuzt die rechte Arteria Iliaca Communis die linke Vena Iliaca Communis, komprimiert die Vene gegen die Lendenwirbelsäule und übt gleichzeitig eine Pulsationskraft auf die Vene aus. Dadurch entstehende Flussstörungen begünstigen die Ausbildung von Tiefen Venenthrombosen (TVT).

Bisherige Behandlungen mit herkömmlichen Venenstents sind zufriedenstellend. Wenn sie jedoch nahe der Bifurkation eingesetzt werden, kann das distale Stentende in die Vena Cava hineinragen und somit den Blutfluss beeinträchtigen. Mit einem abge-schrägten Stent-Design bietet optimed nun eine außergewöhnliche Lösung.



Dans au moins 50 % des cas de thrombose de la veine iliofémorale gauche, on retrouve un syndrome de May-Thurner qui constitue un obstacle.

Cette anomalie anatomique entraîne un chevauchement de l'artère iliaque commune droite et de la veine iliaque commune gauche, une compression de la veine contre les vertèbres lombaires et, dans le même temps, une force de pulsation qui s'exerce sur la veine. Les troubles de la circulation qui s'ensuivent sont à l'origine d'une thrombophlébite profonde.

Les traitements existants ayant recours à un stent veineux classique sont satisfaisants. Mais, lorsque ces stents sont utilisés à proximité d'une bifurcation, l'extrémité distale du stent peut pénétrer dans la veine cave et entraver alors le flux sanguin. optimed propose à présent une solution exceptionnelle avec une conception de stent biseautée.




At least 50% of left-sided pelvic vein thrombosis cases are caused by obstructions due to May-Thurner Syndrome.

In this anatomical anomaly the right common iliac artery overlies and compresses the left common iliac vein against the lumbar spine and at the same time exerts a pulsation force on the vein. Resulting turbulences facilitate the formation of Deep Vein Thrombosis (DVT).

Present therapies with conventional venous stents are satisfactory. However, when placed near the bifurcation, the distal end of the stent can protrude into the vena cava, causing a negative impact on the bloodflow. With an oblique stent design optimed now offers an exceptional solution.


Strength and flexibility combined

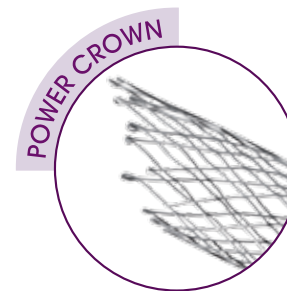

- Power Crown:**
- Anpassung an die Anatomie der Bifurkation
 - Hohe Radialkraft

- Power Crown:**
- Adaptation à l'anatomie de la bifurcation
 - Force radiale élevée


- Power Crown:**
- Adaption to the anatomy of the bifurcation
 - High radial force

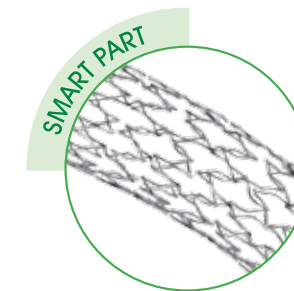

- Smart Part:**
- Hohe Flexibilität
 - Gleichmäßige Kraftverteilung

- Smart Part:**
- Flexibilité élevée
 - Répartition régulière des forces


- Smart Part:**
- High flexibility
 - Homogeneous force distribution

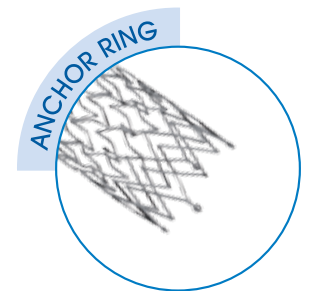

- Anchor Ring:**
- Fixierung des Stents
 - Atraumatische Rundungen


- Anchor Ring:**
- Fixation du stent
 - Arrondis atraumatiques

- Anchor Ring:**
- Fixation of the stent
 - Atraumatically rounded edges

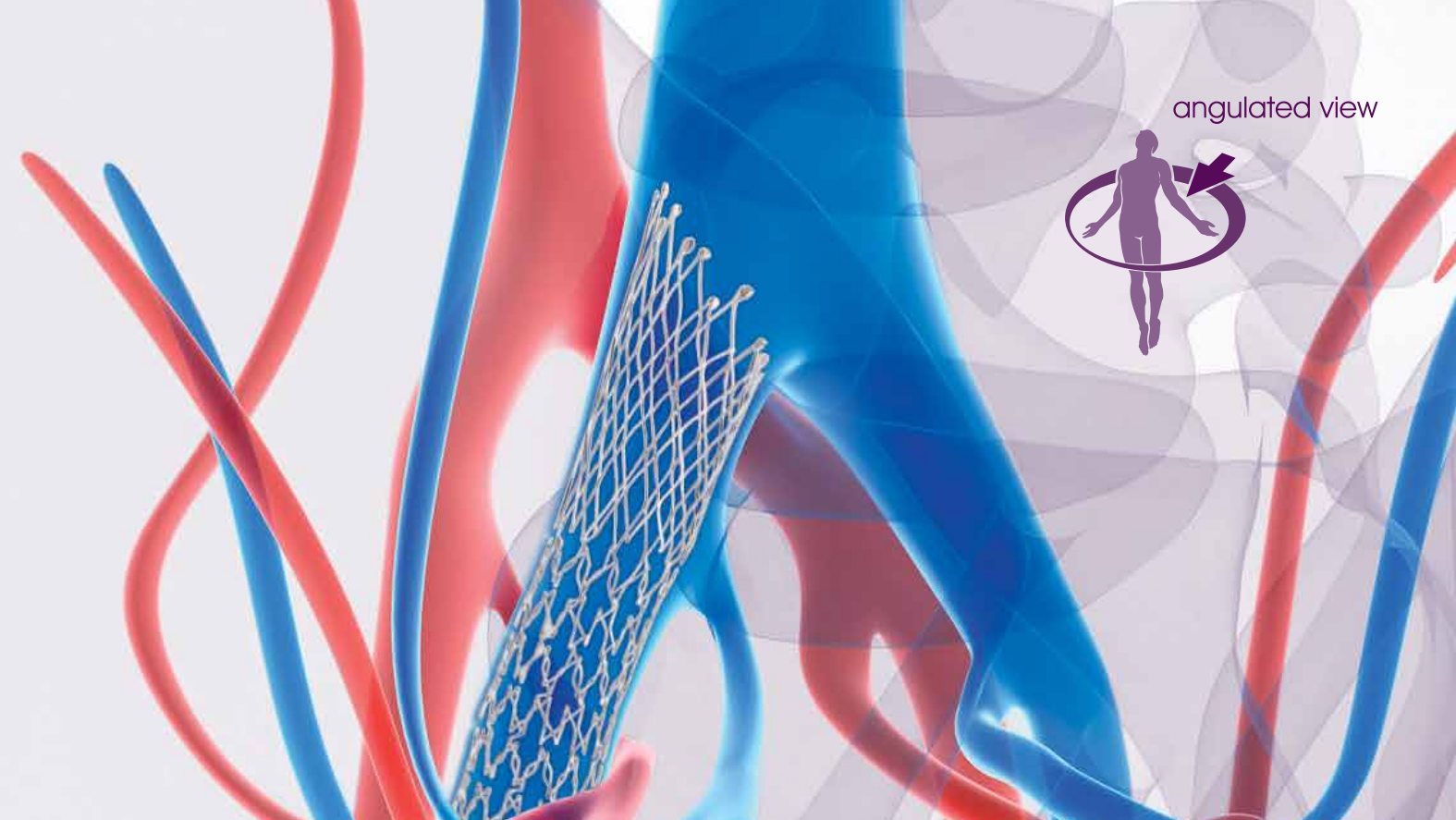


High performance for special requirements

sinus-Obliquus
experience the difference

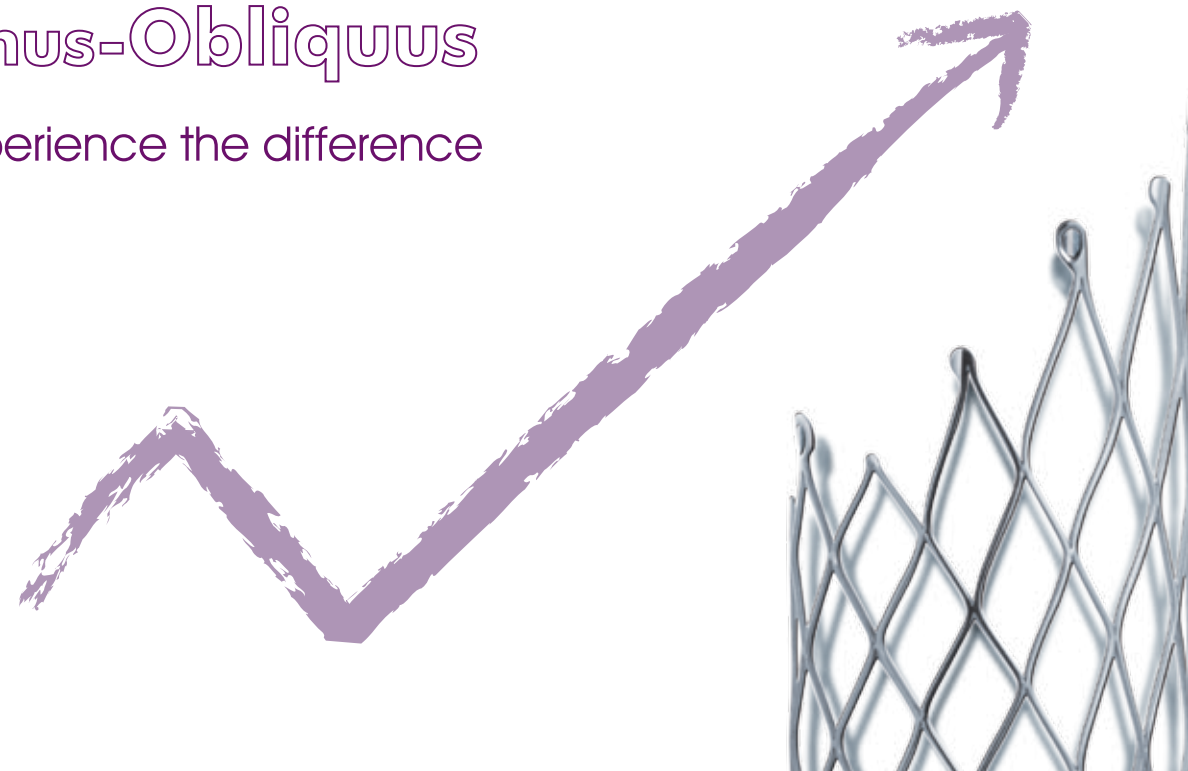

Enhanced anatomical adaption

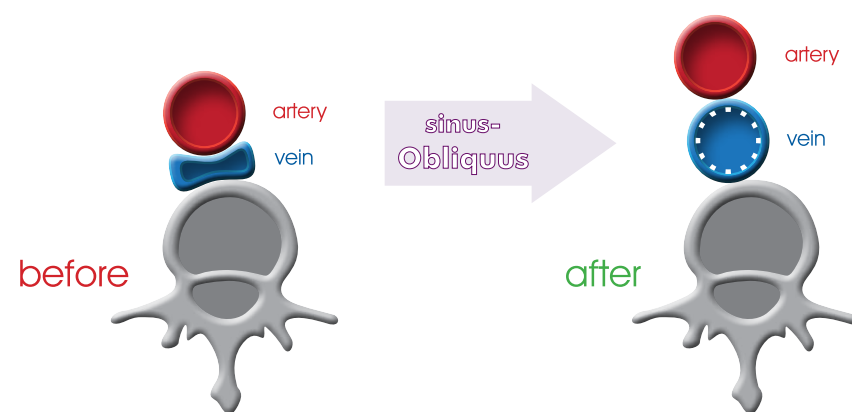

Die Anatomie der Bifurkation erfordert eine besondere Herangehensweise.

Der sinus-Obliquus wurde speziell für venöse Obstruktionen im Bereich der Bifurkation der Vena Cava Inferior entwickelt.

Sein einzigartiges abgeschrägtes Design bietet die Möglichkeit, den Stent direkt an der Bifurkation zu platzieren – optimierte Voraussetzungen für die Behandlung des May-Thurner-Syndroms.



L'anatomie de la bifurcation exige d'adopter une stratégie particulière.

Le sinus-Obliquus a été élaboré spécialement pour les obstructions veineuses dans la zone de la bifurcation de la veine cave inférieure.


Sa conception unique biseautée offre la possibilité de placer le stent directement dans la bifurcation – ce qui constitue un moyen optimisé de traiter le syndrome de May-Thurner.



The anatomy of the bifurcation requires a special approach.


The sinus-Obliquus was specifically designed for treating venous obstructions close to the bifurcation of the inferior vena cava.

Its exceptional oblique design offers the possibility to place the stent directly at the bifurcation – optimized requirements for the treatment of May-Thurner Syndrome.

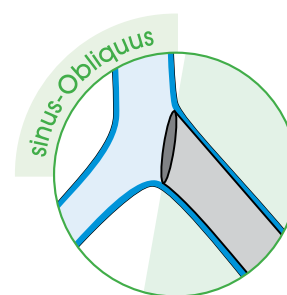


Bei der Verwendung von herkömmlichen Venenstents ist eine optimale Gefäßabdeckung oft nicht möglich.

Wird der Stent zu weit in Richtung Vena Cava vorgeschoben, beeinflusst das distale Stentende den Blutfluss negativ. Wird der Stent nicht weit genug vorgeschoben, kann der durch die Arterie komprimierte Gefäßabschnitt nicht hinreichend abgedeckt werden und die Obstruktion persistiert. Beide Möglichkeiten sind nicht optimal.

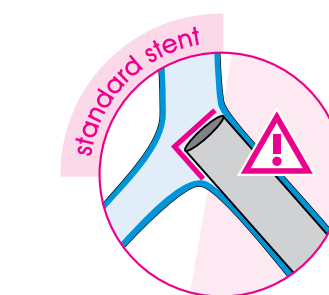

Lorsqu'on utilise un stent veineux classique, il n'est pas toujours possible d'obtenir une couverture optimale du vaisseau concerné.

Si le stent est inséré trop loin en direction de la veine cave, l'extrémité distale du stent a une influence négative sur le flux sanguin. Si le stent n'est pas inséré suffisamment loin, la portion de vaisseau comprimée par l'artère peut ne pas être suffisamment recouverte et l'obstruction persiste. Aucune de ces deux possibilités n'est optimale.

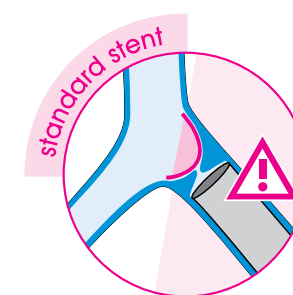


Very often it is not possible to achieve optimal vessel coverage using conventional stent designs.

In case the stent protrudes into the inferior vena cava, the distal stent end obstructs the bloodflow. In case the compressed vessel section is not completely covered by the stent, the obstruction persists. Both options are not ideal.



sinus-Obliquuus

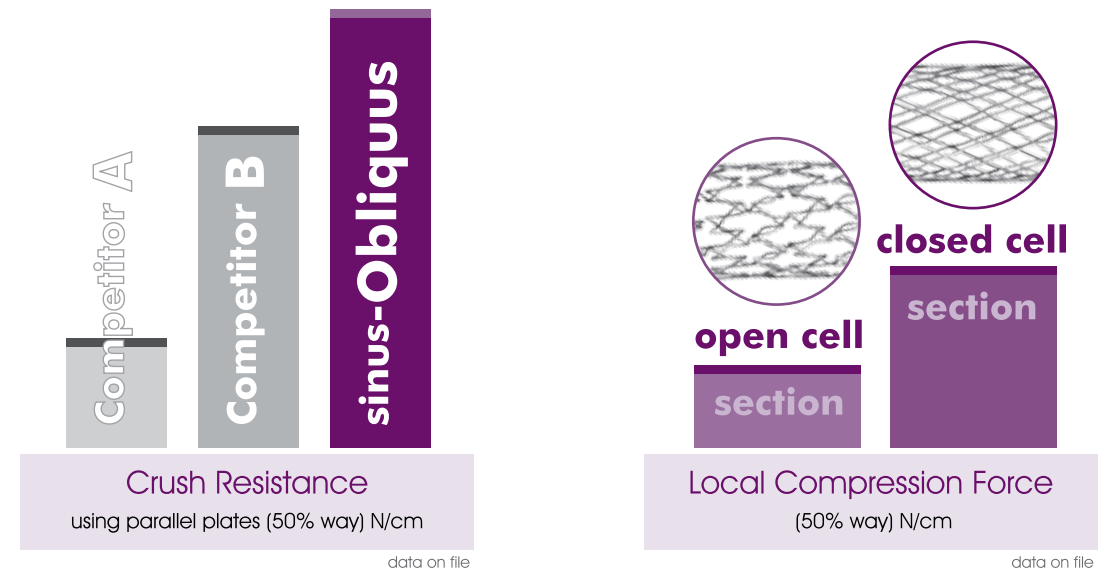

New perspectives in design and technique

Repositionable - easing of placement



Anti-Jump-Technik

- Zur exakten Platzierung, insbesondere bei kurzen Stentlängen
- Kein Springen des Stents



Technique anti-jump

- Pour une mise en place exacte, notamment lorsque le stent est court
- Le stent ne « saute » pas



Anti-jump-technique

- For exact placement, especially for short stent lengths
- No stent jumping



anti-jump technique



hybrid design



electro-polishing



radiopaque markers



atraumatic soft-tip



braided sheath



repositionable stent



Repo-Technik

- Für eine einfachere Stentplatzierung ist der Stent bis zum Erreichen der roten Markierung repositionierbar




Technique de repositionnement

- Pour une mise en place plus facile, le stent est repositionnable jusqu'à ce que le marquage rouge soit atteint



Repo-technique

- To simplify the stent placement, the stent is repositionable up to the red marking

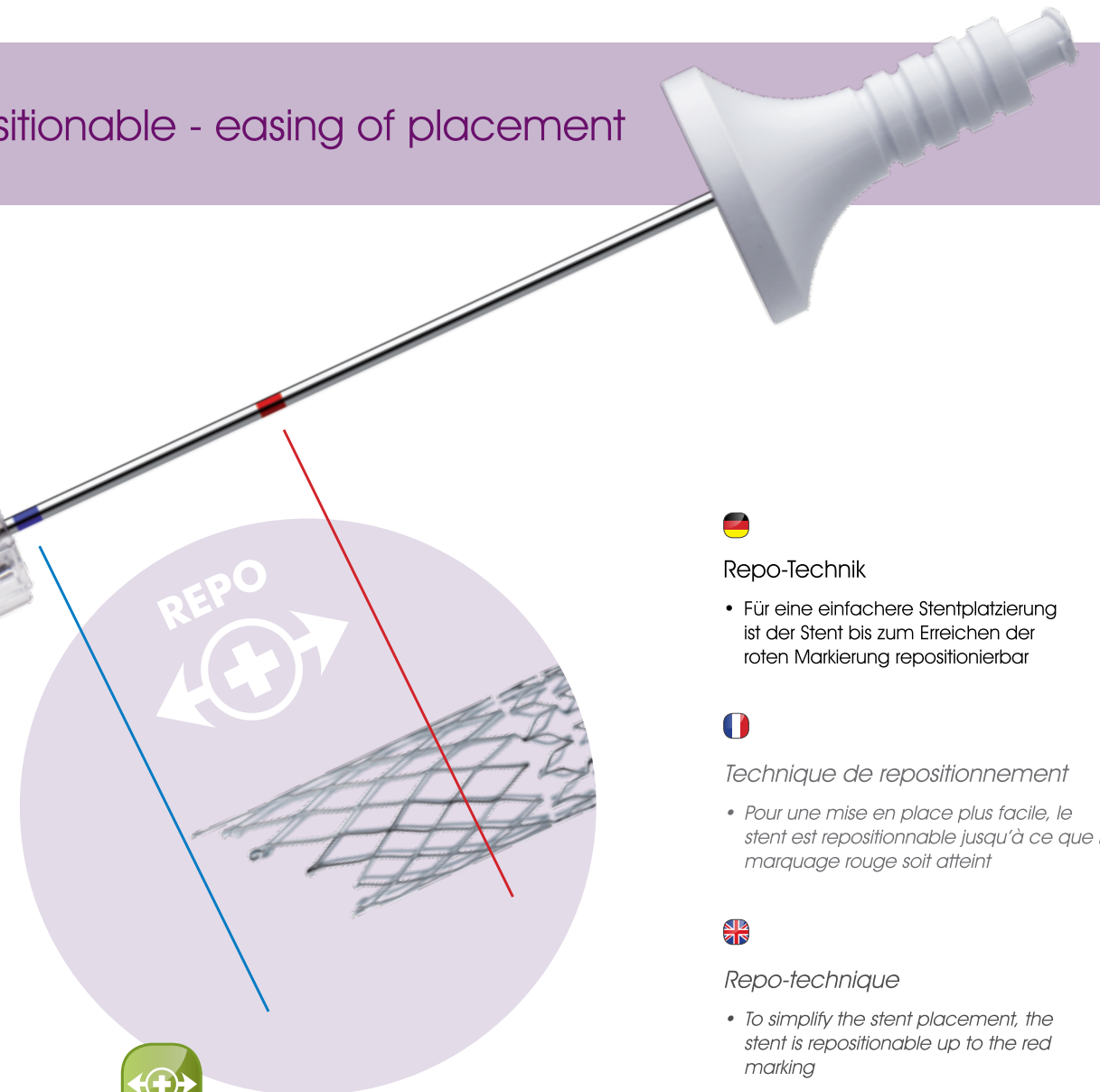

Bestell-Nr. - Länge des Einführbestecks <i>référence - longueur système de pose</i> <i>order code - length of application device</i>	Stent 	Stent <i>Länge / longueur / length</i>
100 cm	mm	mm
8414-8080	14	80
8414-8100	14	100
8414-8150	14	150
8416-8080	16	80
8416-8100	16	100
8416-8150	16	150

10F Applikationssystem, Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht
 10F Système d'application de 10F adapté au fil-guide de .035 inch
 10F application device, adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück · *conditionnement* : 1 unité · *box*: 1 unit



hybrid
design



repositionable
stent



radiopaque
markers



electro-
polishing



anti-jump
technique



braided
sheath



atraumatic
soft-tip



10F application device & 0.035 inch guide wire

NOM DU PRODUIT: sinus-Obliquus **DESTINATION:** Le stent sinus-Obliquus a été élaboré pour les obstructions veineuses dans la zone de la bifurcation de la veine cave inférieure. **Indications:** Obstructions symptomatiques de la veine iliaque à proximité de la bifurcation de la veine cave inférieure. La sécurité et l'efficacité du sinus-Obliquus ne peuvent pas être garanties pour les indications autres que celle qui est mentionnée ci-dessus. Pour des informations plus amples, lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIb **ORGANISME NOTIFIE:** DEKRA 0124 **FABRICANT:** optimed Medizinische Instrumente GmbH **MODE D'EMPLOI:** Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif médical **DATE DE PUBLICATION:** 01/2015 **Etat de révision:** 1

RA-0280-01/2015